

Anleitung BioParRes Ozon Maker nach Dr.Beck

Betriebshinweise:

Das Gerät darf ausschließlich mit Originalzubehör betrieben werden. Experimente außerhalb dieser Anleitung können zu Schädigungen für Mensch und Gerät führen. Das Gerät muss immer trocken und temperiert gelagert werden (z.B. im Winter nicht im Auto belassen). Wenn das Gerät Feuchtigkeit oder Kälte ausgesetzt war, dann muss es erst mind. 30min. uneingeschaltet und temperiert gelagert werden, bevor es eingeschaltet wird. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise wird die Garantie unwirksam.

1. Anwendung / Zur schnelleren Entgiftung bei Beck oder Clark Kuren

Verbinden Sie den Sprudler mit dem Schlauch und das andere Ende des Schlauches mit dem Ozon-Ausgang des Gerätes. Befüllen Sie ein Glas mit gutem Wasser (auch destilliertes Wasser ist gut geeignet) und legen Sie den Sprudler hinein.

Das Ozongas darf nicht eingeatmet werden. Das **Glas** muss daher im Freien oder unter einer auf Maximum eingeschalteten Abzugshaube stehen. Wenn Sie jedoch das Ozongas im Raum riechen, dann ist Ihre Abzugshaube nicht geeignet und das Glas muss im Freien stehen. Das Gerät selbst kann frei im Raum stehen.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Schalten sie den seitlichen Netzschalter EIN.

Nun stellen Sie mit + die Zeit in Minuten ein:

Glas 200ml = 10 min.

Glas 400-500ml = 20-25 min.

Nun drücken Sie zum Start (oder Stop) den roten on/off Taster.


Wenn Sie eine 4er Beck-Kur machen (Blutzapper, Magnetpulser, Silberwasser, Ozonwasser), dann sollten Sie erst in der 2.Woche mit dem Magnetpulser anfangen. Denken Sie daran, dass Sie auch schnell entgiften müssen (Ozonwasser), damit Ihre Erstverschlimmerungen oder Herxheimerreaktionen nicht zu heftig werden. Das Ozonwasser sowie Silberwasser sollten Sie nur auf nüchternen bzw. leeren Magen trinken. Silberwasser hält sich nach der Herstellung bei richtiger Lagerung über 2 Monate.

Ozonwasser müssen Sie aber sofort nach der Herstellung trinken, da es sehr schnell flüchtig ist. Trinken Sie aber Silberwasser und Ozonwasser nicht zur gleichen Zeit, sondern lassen Sie dazwischen mind. 30min. Zeit.

Wenn Sie das mehrmals täglich machen, dann bleibt nicht viel Zeit mehr zur Nahrungsaufnahme. Machen Sie sich deshalb einen richtigen täglichen Plan. Wenn Ihre Entgiftungssymptome zu lange andauern, dann pausieren Sie die Behandlungen mit Magnetpulser und Blutzapper.

Beispiel eines Plans: 7.00 Uhr großes Glas Ozonwasser nüchtern, 7.30 Uhr halbes Glas (100ml) Silberwasser, 8.00 Uhr Frühstück (evtl. Medikamente vorher), 9.00 Uhr Magnetpulser, 10.30 Uhr Blutzapper, 12.30 Uhr Ozonwasser auf leeren Magen, 13.00 Uhr Silberwasser auf leeren Magen, 13.30 Uhr Mittag ... usw.

Wenn Sie Räume entgiften bzw. Gerüche neutralisieren wollen, dann lassen Sie das Ozongas in den Raum ohne dass sich darin Personen oder Tiere aufhalten dürfen. Im Anschluss muss mind. 2 Stunden richtig gelüftet werden, bevor Personen den Raum wieder betreten dürfen.

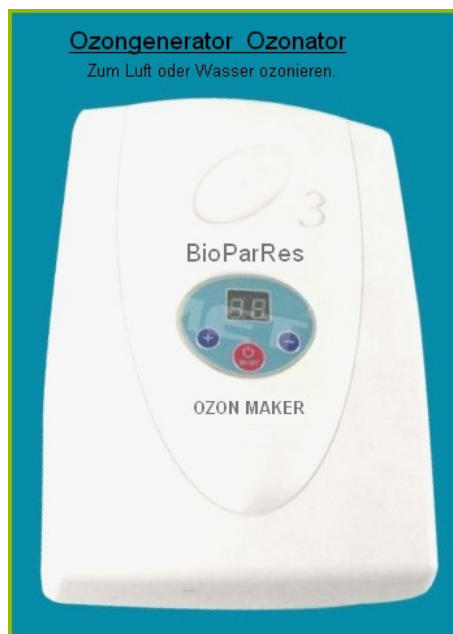

Technische Daten:

Netzbetrieb 230V AC (Steckdose)

Leistung: mind. 400mg/h

Zeit : in Minuten einstellbar

Warnung: Ozongas darf nicht direkt eingeatmet werden.

Haftungsausschluss:

Die Anwendung des Ozon Makers schließt nicht den Besuch beim Arzt aus. Wir übernehmen keinerlei Haftung und versprechen keinerlei Heilerfolge. Es sind keine Nebenwirkungen bei der Benutzung eines Ozon Makers bekannt. Der Anwender dieses Gerätes haftet in Allem für sich selbst. Dieser Ozon Makers ist kein medizinisches Produkt und er erbringt mit der Anwendung keinerlei medizinische Ansprüche oder Beweise.